

## Čtyřkolové chodítko Kód výrobku TGR-R RS 8812

### 1. Provedení

Čtyřkolové chodítko je vyrobeno z ocelového chromovaného rámu. Je vybaveno pěnovými madly, držákem na kapačku, polstrovanou loketní opěrkou s plynule nastavitelnou výškou, odnímatelným sedátkem a otočnými koly s aretací. Sada obsahuje: rám chodítka s koly, stabilizační horní rám, stabilizační dolní rám, loketní opěrku, sedátko, zajišťovací klipy – 4 ks, motýlkové zajišťovací šrouby – 2 ks

#### **Součásti chodítka:**

a. madlo

b. loketní opěrka

c. zajišťovací klip


d. horní stabilizační rám

e. dolní stabilizační rám

f. montážní motýlkový šroub

g. sedátko

h. držák na kapačku

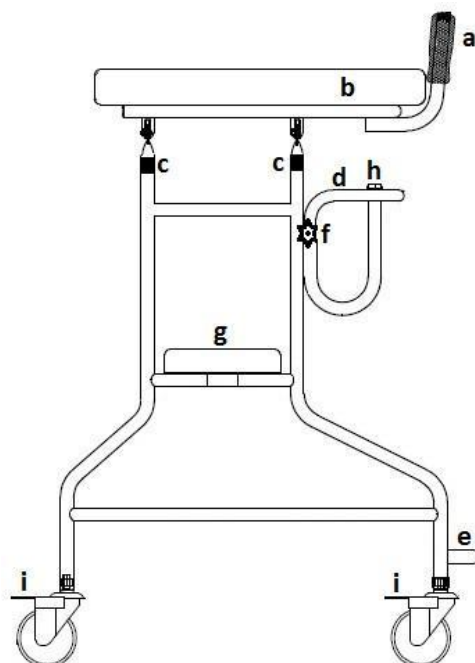

i. brzda

## **2. Použití**

Chodítka je pomůcka, která je určena pro osoby se sníženou pohyblivostí, které potřebují silnou podporu a jištění při vertikalizaci a chůzi. Chodítka je určeno pro pacienty s různým typem pohybových obtíží, s omezenou pohyblivostí a dysfunkcí nebo oslabením dolních končetin. Je vhodné také pro seniory, kterým pomáhá udržovat rovnováhu, zlepšuje komfort při pohybu a zabraňuje pádu. Používání chodítka podporuje obnovení aktivity a vertikalizaci osob s pohybovými obtížemi. Zajišťuje lepší stabilitu, podporu a bezpečí při chůzi.

## **3. Montáž**

### **Rozložení chodítka**

- Postavte rám chodítka na podložku tak, aby dolní stabilizační rám byl na vnější straně. Pak nasadte horní stabilizační rám do montážních otvorů v přední části rámu a fixujte ho montážními šrouby.
- Nasadte loketní opěrku do montážních otvorů rámu chodítka a zajistěte ji zajišťovacími klipy v požadované výšce.
- Sedátko, určené ke krátkému odpočinku, namontujte na dolní část rámu. Při chození s chodítkem zavěste sedátko na vnější částí rámu.
- Případnou kapačku fixujte v montážním otvoru na přední části rámu chodítka.

### **Funkce brzd**

**Pozor!** Při používání sedátka chodítka bezpodmínečně zabrzdte všemi brzdami.

### **Nastavení výšky loketní opěrky**

Výšku nastavte v takové výšce, aby uživatel chodítka stál tak rovně, jak mu to dovoluje zdravotní stav, s rameny v uvolněné poloze lokty na opěrce. Není vhodné se opírat o chodítko celou váhou těla. Výšku loketní opěrky nastavíte tak, že vytáhnete zajišťovací klip, který je na vnější straně rámu, pak nastavíte požadovanou výšku a nasadíte zpět zajišťovací klip.

#### **4. Technická specifikace**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Šířka celkem                   | 63 cm         |
| Hloubka celkem                 | 76 cm         |
| Rozměry sedátka                | 56 cm x 20 cm |
| Výška sedátka nad podložkou    | 54 cm         |
| Nastavení výšky loketní opěrky | 101-124 cm    |
| Hmotnost                       | 10,8 kg       |
| Max. nosnost                   | 100 kg        |

#### **5. Poznámky a doporučení**

**Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s účelem.**

#### **6. Údržba**

- Rám chodítka očistěte vlhkým hadříkem a pak ho důkladně osušte.
- Nepoužívejte silné lešticí prostředky, neboť tím může dojít k poškození ochranných nátěrů.
- Průběžně odstraňujte zašpinění pohyblivých dílů chodítka (závěsů, zajišťovacích šroubů, zajišťovacích prvků).

#### **7. Údaje týkající se záruky**

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

## 8. Označení

|                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | Referenční číslo                                                                                |  | Výrobce                 |
|   | Číslo šarže                                                                                     |  | Datum výroby            |
|   | Sériové číslo                                                                                   |  | Zdravotnický prostředek |
|   | Pozor                                                                                           |  | Seznamte se s návodem   |
|  | Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb. |                                                                                   |                         |

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.

Více informací je na : **[www.timago.com](http://www.timago.com)**

Děkujeme že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021