

NÁVOD K OBSLUZE

Čtyřkolové chodítko předloketní

Kód výrobku: LEXI


Timago

1. Provedení

Čtyřkolové chodítko je vyrobeno z hliníkového rámu s práškovým nástřikem. Je vybaveno brzdami s blokací v parkovací poloze, sedátkem, držákem hole a taškou. Má nastavitelnou výšku a délku rukojetí, loketní opěrku a plná kola o průměru 8".

Balení obsahuje: nosný rám se sedátkem, madla s brzdou, sponu, aretační šroub, tašku.

Součástí chodítka:

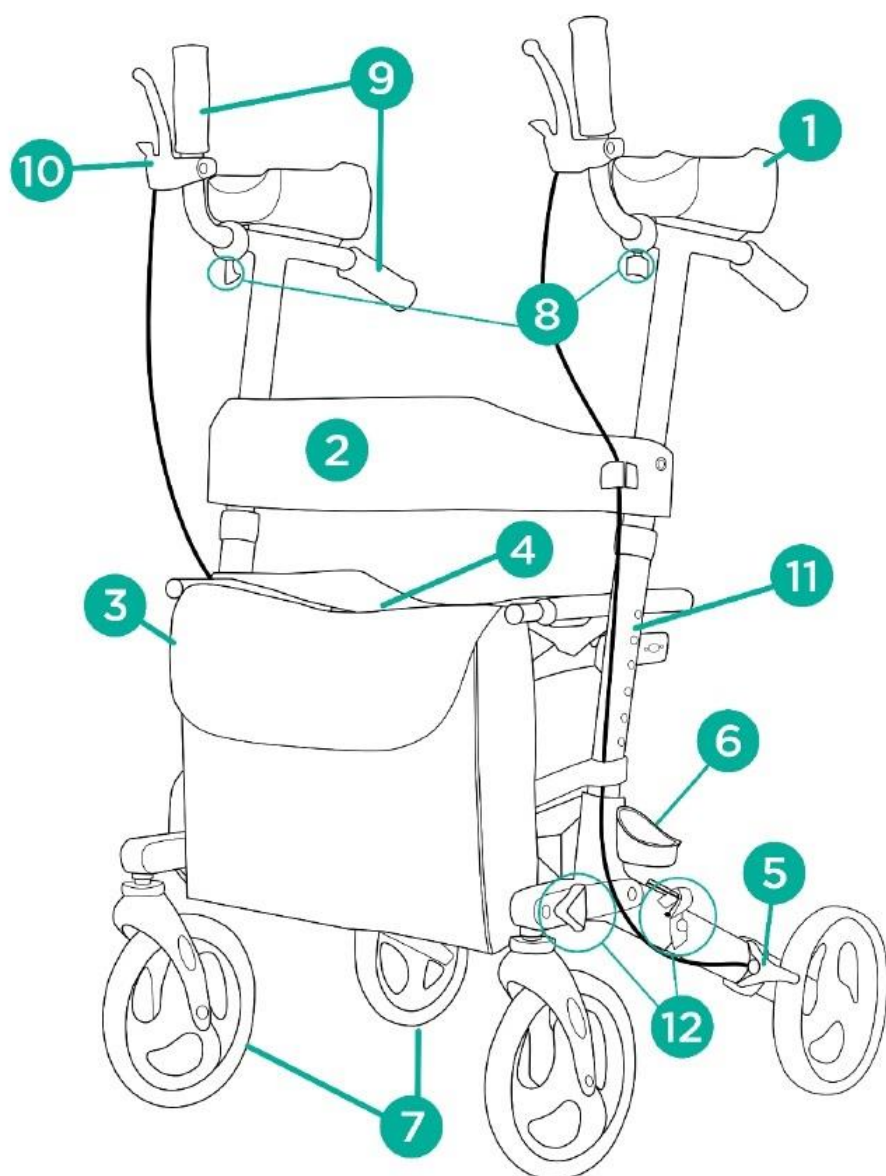

- 1 loketní opěrky
- 2 opěrka
- 3 taška
- 4 sedátko
- 5 brzda
- 6 držák hole
- 7 zadní a přední kola 8"
- 8 nastavení madel
- 9 madla
- 10 brzdová páčka s blokací v parkovací poloze
- 11 výškové nastavení
- 12 spona a aretační šroub



2. Účel použití

Čtyřkolové chodítko je pomocné zařízení určené pro osoby se sníženou pohyblivostí, které potřebují stabilní oporu a podporu při chůzi. Podpora je určena zejména pro pacienty s revmatickými změnami, omezenou pohyblivostí v radiokarpálních a loketních kloubech a pro osoby s oslabenou silou úchopu. Doporučuje se také starším lidem pro udržení rovnováhy, zlepšení komfortu pohybu a zajištění bezpečnosti proti pádům. Používání chodítka má pozitivní vliv na návrat k aktivitě lidí, kteří mají problémy s pohybem nebo vzpřímeným stáním.

3. Montáž

Rozložení a složení chodítka

- 1) Nejprve rozložte spodní část rámu.
- 2) Odšroubujte aretační šroub zajišťující rám chodítka a pomalu posuňte kolo dolů, poté šroub utáhněte. Opakujte postup na druhé straně rámu.
- 3) Vytáhněte sponu a odjistěte aretační čep z montážních otvorů na rámu (obr.1) a umístěte rám tak, aby byly oba nosníky rámu vzájemně vodorovné (obr. 2). Poté rám zajistěte sponou a čepem (obr. 2).

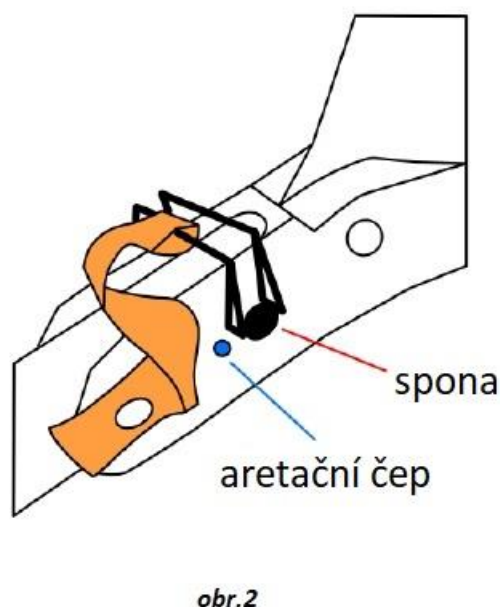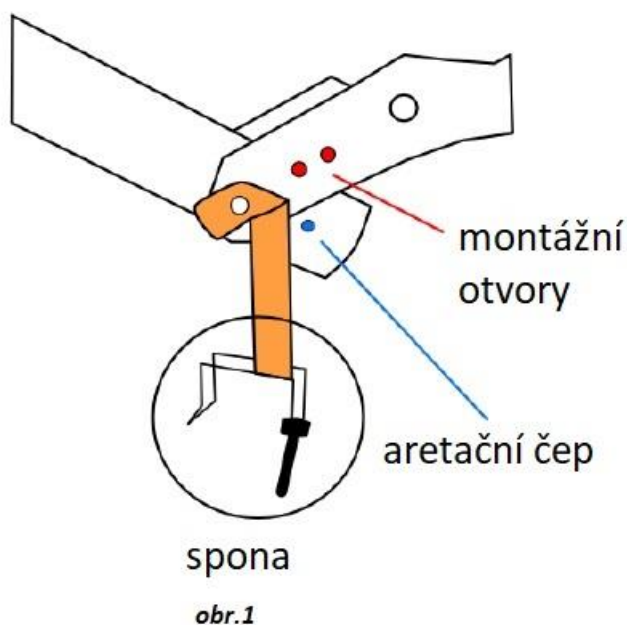

- 4) Rozložte chodítko zatlačením na sedadlo, dokud nezaklapne.

Při správném rozložení by mělo mít chodíko ploché sedátko bez jakýchkoli ohybů.

- 5) Nainstalujte horní část chodítka do spodního rámu. Nastavte výšku rukojetí pomocí aretačních čepů. Ujistěte se, že výška obou rukojetí je stejná.
- 6) Připevněte tašku k přední části chodítka. Pro dodatečnou ochranu brzdových lanek je připevněte k rámu a opěrce pomocí suchého zipu.
- 7) Chodítko je připraveno k použití.

Funkce brzd

- Pro zastavení chodítka zatáhněte za brzdu k sobě směrem k rukojeti.
- Brzdy mají funkci aretace v parkovací poloze, která se aktivuje úplným zatažením brzdy. Chcete-li zámek uvolnit, uchopte rukojeť brzdy, stiskněte ji a stiskněte blokovací prvek (umístěný pod rukojetí brzdy).

POZOR! Při používání sedátka zajistěte parkovací brzdu.

Nastavení vzdálenosti a výšky madel

- Chcete-li upravit vzdálenost madel, odšroubujte šroub umístěný pod madlem, vyberte příslušné nastavení a poté jej utáhněte. Opakujte akci na druhé straně. Nastavte madla ve stejné vzdálenosti.
- Pro nastavení výšky madla stiskněte aretační čep umístěný na bočním rámu, zvolte vhodnou výšku a poté jej opět zajistěte. Nastavte madla do stejné výšky.

4. Technická specifikace

Celková šířka	62 cm
Celková hloubka	66,5 cm
Rozměry sedátka	46 x 24 cm
Celková výška	112-124 cm
Rozměry po složení	74 x 30 x 60 cm
Nastavení výšky loketních opěrek	98-110 cm

Výška sedátka od podlahy	53,5 cm
Hmotnost	8,70 kg
Maximální zatížení	136 kg
Barva rámu	černá

5. Poznámky a upozornění

Timago International Group nezodpovídá za nesprávné používání chodítka, nedodržování bezpečnostních pokynů a za používání v rozporu s určením.

6. Údržba

- Nosný rám je třeba čistit vlhkým hadříkem a poté důkladně osušit.
- Nepoužívejte drsné lešticí prostředky, protože by mohly poškodit ochranné povlaky.
- Pravidelně byste měli odstraňovat nečistoty a kontrolovat stav pohyblivých prvků chodítka (aretační čepy, aretační šrouby, kola).

7. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému působení slunečních paprsků, vody a vlhkosti.

8. Údaje týkající se záruky

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány ve vámi obdrženém záručním listu. Pro záruční účely uschovejte doklad o nákupu (účtenku nebo fakturu).

9. Symboly

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériiové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se zásadními nároky na zdravotnické výrobky.		

Celá nabídka je pro vás dostupná u našich distributorů. Zjistěte více na www.timago.com
Děkujeme za volbu Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



07/2024 (I)