

NÁVOD K OBSLUZE

Stolek přilůžkový


Kód výrobku: TableTIM Multi



1. Provedení

Rám nočního stolku je ve tvaru C, což umožňuje jeho mobilitu a posouvání nad postelí. Stůl má desku, na kterou lze pokládat předměty a kolečka s brzdou. Výšku a úhel sklonu desky stolu lze přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Balení obsahuje: rám základny, rám pracovní desky, desku a montážní šroub s křídlovou hlavou.

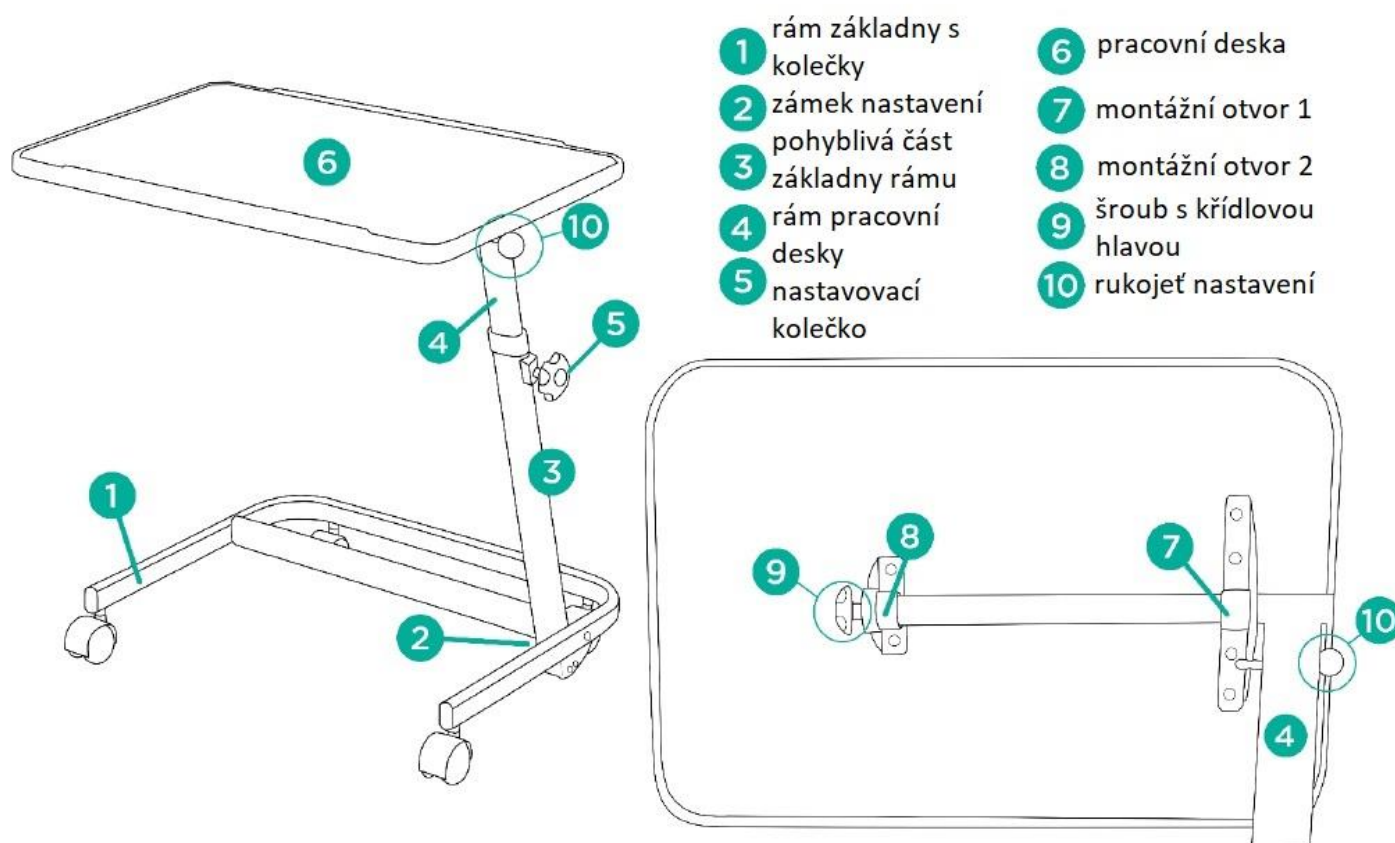

2. Použití

Noční stolek určený k použití přímo nad lůžkem pacienta jako povrch pro jídlo, čtení nebo psaní v posteli. Výrobek je určen k použití jak při péči ve zdravotnických zařízeních, tak v domácnosti.

3. Montáž a nastavení

- Postavte základní rám (1) na kola a zabrzděte je.
- Zatáhněte a přidržte zamek nastavení (2) na rámu základny, poté zvedněte pohyblivou část rámu (3) do svislé polohy. Pojistný kolík by měl uzamknout zvolené nastavení (cvaknutí).
- Rám pracovní desky stolu (4) vložte do čtvercového otvoru v pohyblivé části základny rámu a utáhněte jej ve zvolené výšce pomocí nastavovacího kolečka (5) - po složení by měl složený rám stolu připomínat písmeno C.
- Spojte desku stolu (6) s rámem desky (4). Nejprve by měla kulatá trubka rámu desky projít montážním otvorem 1 (7) a poté montážním otvorem 2 umístěným blíže středu desky stolu (8).
- Po provlečení trubky druhým montážním otvorem našroubujte zvenku šroub s křídlovou hlavou (9) do trubky rámu desky stolu.

Nastavení sklonu desky stolu

- Chcete-li nastavit úhel desky stolu, zatáhněte a podržte nastavovací rukojeť (10).
- Po nastavení vhodného úhlu pusťte nastavovací rukojeť tak, aby se nastavovací kolík zablokoval v jedné z 9 možných možností nastavení.

Nastavení sklonu rámu

- Chcete-li upravit úhel sklonu základního rámu (3), zatáhněte a podržte zamek nastavení (2) a poté nastavte rám do nové polohy.
- Po nastavení požadovaného úhlu pusťte zamek nastavení – zajišťovací čep by měl zablokovat zvolené nastavení (cvaknutí).

Nastavení výšky desky stolu

- Chcete-li nastavit výšku desky stolu, povolte nastavovací kolečko (5).
- Po nastavení požadované výšky kolečko utáhněte.

Brzdy

- Při používání stolu by měly být brzdy kol zablokovány.

4. Technická specifikace

Rozměr rámu (d x š)	58,6 cm x 53,8 cm
Rozměr desky	60 x 40 cm
Nastavení sklonu desky	0° - 90°
Nastavení sklonu desky	72° / 90°
Nastavení výšky	70 – 93 cm
Hmotnost	8,3 kg
Nosnost	10 kg
Průměr kol	2" (5cm)

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group není zodpovědná za nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních pravidel a také za použití, které není v souladu s jeho určením.

6. Údržba

Výrobek by měl být čištěn vlhkým hadříkem a poté důkladně vysušen. Nepoužívejte drsné lešticí prostředky, protože by mohly poškodit ochranné povlaky. Nečistoty by měly být pravidelně odstraňovány z pohyblivých částí výrobku (panty, upínací šrouby, zámkové, kola).

7. Skladovací a přepravní podmínky

Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření, vodě nebo vlhkosti.

8. Informace o záruce

Na produkt se vztahuje záruka dle platného zákona. Pro účely záruky si uschovejte doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

9. Symboly

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



07/2024(I)