

Ocelový Invalidní vozík

Kód výrobku: H011

1. Provedení

Invalidní vozík tvoří ocelový rám s práškovým lakováním. Je vybaven odolným sedákem z nylonu a bavlny černé barvy, polštářem, výškově nastavitelnými a odklopnými područkami, stupačkami, které jsou ve standardní (odklopné) verzi nebo s nastavitelným sklonem. Zadní kola (24") mají ocelové dráty a jsou vybaveny nafukovacími pneumatikami, nebo jsou plná, gumová. Přední kola (8") jsou plná, z gumy se zvýšenou odolností proti opotřebení. Volitelné možnosti: plná gumová zadní kola, stupačky s nastavitelným sklonem, brzda pro doprovod, stolek. **Sada obsahuje:** rám vozíku se sedákem, pravou stupačku, levou stupačku, bezpečnostní popruh, pumpičku, sadu montážních klíčů.

Součásti vozíku:

a – madlo


b – výškově nastavitelné područky

c – tlačítko

zarážky

područky

d – bezpečnostní brzda

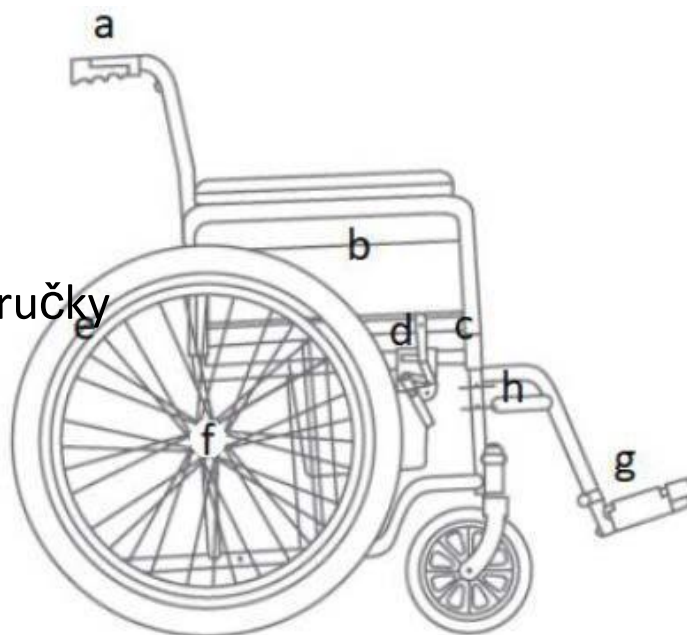

e- poháněcí obruč

f- rychlospojka

g- stupačka

h – montážní trn stupačky

2. Použití

Ocelový invalidní vozík je pomůcka pro osoby, které se obtížně pohybují, mají pohybové dysfunkci a omezení. Pohyb vozíku zajišťuje uživatel svými rukama, nebo pomocí doprovodu. Vozík je určen k použití ve vnitřních i venkovních prostorech.

3. Montáž

ROZLOŽENÍ A MONTÁŽ

Krok 1. Rozložení vozíku

Postavte vozík na podložku. Pomocí madel vzadu na opěradle vozík rozložte. Pak zatlačte na okraje sedáku zepředu a zezadu tak, aby všechny díly vozíku dosedly. **Krok 2. Montáž stupaček** Namontujte pravou a levou stupačku vpředu na hlavní rám jejich nasazením na dva trny a otočením dovnitř, dokud se nezablokují. **Krok 3. Nastavení stupaček** Seřídte pravou a levou stupačku pomocí kolíků a zajišťovacího klipu na stupačce. U stupaček s nastavitelným sklonem nastavte pákou úhel sklonu vůči podložce. Stupačky nastavte tak, aby úhel mezi trupem a stehny činil asi 90° (tím bude uživatel v optimální sedící poloze). **Krok 4. Montáž bezpečnostního popruhu** Nasadte bezpečnostní popruh na stupačky. Bezpečnostní popruh slouží k fixaci nohou uživatele, aby za jízdy nesklouzly pod vozík. Vozík nepoužívejte bez nasazeného bezpečnostního popruhu. **Po provedení výše uvedených úkonů je vozík připraven k použití.**

OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ VOZÍKU

- Před složením rámu vozíku sklopte stupačky do svislé polohy (kolmo k podložce).
- Rám vozíku složíte jeho uchopením uprostřed vpředu a vzadu a současným zatažením za sedák nahoru tak, aby se rám uvolnil se spojovacích prvků.

FUNKCE ODKLOPENÍ PODRUČEK

- Stiskněte pojistku vpředu u područky a odklopte ji dozadu.
- Područku zajistíte jejím zatlačením dolů, dokud nezacvakne pojistka.

FUNKCE NASTAVENÍ VÝŠKY PODRUČKY

- Výšku područky nastavíte tak, že zatáhněte za zarážku, která je na vnitřní straně rámu područky.
- Pak područku zvedněte nahoru nebo zatlačte dolů (nastavování co 2,5 cm) a uvolněte zarážku.

FUNKCE NAFUKOVÁNÍ KOL

- Volitelně může být vozík vybaven 24" nafukovacími zadními koly s průměrem a 8" předními otočnými koly z PU (bezdušové). Vždy systematicky kontrolujte tlak vzduch v obou kolech. Kontrolujte také stav pneumatik, zda nejsou prodřené, dřevé, nebo opotřebené.
- Při huštění pneumatik odšroubujte čepičku ventilku, nasadte na ventil pumpičku (součást dodávky) a pak nafoukejte pneumatiku na požadovaný tlak.

FUNKCE BEZPEČNOSTNÍCH BRZD

- Pokud chcete znehybnit kola, posuňte brzdovou páku dopředu, až se úplně zablokuje (zvlášť levé a pravé kolo).

SEŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH BRZD

Aby parkovací brzda fungovala správně, musí být správně seřízená a nastavená. Brzda musí být nastavená tak, aby silně blokovala kolo a ovládání páky nevyžadovalo nadměrnou sílu.

- Při přílišném odporu je nutné posunout brzdu mírně vpřed uvolněním zajišťovacího šroubu na druhé straně brzdy (zevnitř vozíku) a nastavením brzdy v takové poloze, aby chodila lehce a bez odporu.
- Pokud se brzdová zarážka nedotýká celou plochou kola a dostatečně ho neblokuje, postupujte výše popsáním způsobem a posuňte brzdu opačným směrem.

FUNKCE POPRUHŮ PRO UŽIVATELE

Popruh, který je ve standardní výbavě, slouží k fixaci trupu v případech, kdy uživatel sklouzává z vozíku, nebo se sám neudrží ve správné poloze. Popruh se zapíná na přezku.

4. Technická specifikace

Šířka celkem	57-67 cm
Vnější šířka	40, 43, 46, 48, 51 cm
Hloubka celkem	104 cm
Výška sedáku nad podložkou	50 cm
Výška celkem	91 cm (88 cm)
Rozměry sedáku	39, 42, 45, 47, 50 x 40 cm
Hmotnost	18,6-21 kg

Maximální nosnost*	115 kg pro rozměr 48 cm 135 kg pro rozměr 51 cm
Šířka po složení	30 cm
Barva rámu	stříbrná, černá, tmavomodrá

* podle šířky sedáku

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání vozíku, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s

6. Mytí a údržba

Systematicky udržujte součásti vozíku:

- Polstrování a polštář lze mýt hadříkem namočeným do studené nebo teplé vody, který ale nebude mokrá, a bez čisticích prostředků. Odolnější skvrny odstraňte houbou. Při údržbě polstrování dávejte pozor, aby nedošlo k jeho nadměrnému navlhnutí. Sušte mimo dosah zdrojů tepla.
- Plastové díly čistěte vlhkým hadříkem, případně přípravky na čištění umělé hmoty. Dodržujte pokyny výrobce a zásady bezpečnosti při používání čisticích prostředků.

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.

Více informací je na **www.timago.com**

Děkujeme že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021