

Pojízdné toaletní křeslo


Kód výrobku: FS 692

1. Provedení

Pojízdné toaletní křeslo tvoří ocelový, práškově lakovaný, rám. Křeslo je vybaveno sklopnými loketními opěrkami, které usnadňují nastupování a vystupování osob s omezenou hybností. Je vybaveno měkkým sedákem, který je čalouněn nepromokavým a snadno omývatelným materiálem, čtyřmi otočnými koly, z nichž dvě jsou vybavena brzdami, sklopnými stupačkami a toaletní nádobou. Konstrukce křesla mu umožňuje najet nad toaletní mísu. **Sada obsahuje:** rám křesla, sedák, opěradlo, pravou stupačku, levou stupačku, bezpečnostní popruh, klíč pro nastavení výšky stupaček, toaletní nádobu s víkem.

Součásti křesla:

- a. aretační klipy rámu
- b. sedák
- c. loketní opěrka
- d. aretační čep
- e. stupačky
- f. montážní trn stupačky
- g. brzda s aretací

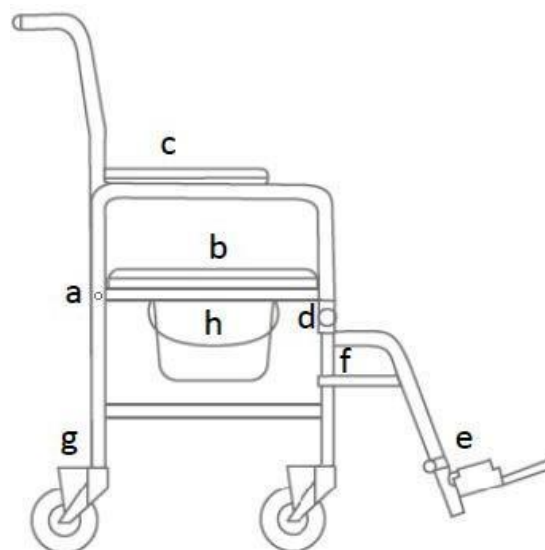

h. toaletní nádoba

2. Použití

Pojízdné toaletní křeslo je pomůcka pro osoby, které mají problém se samostatným pohybem, a také pro osoby s pohybovými dysfunkcemi a omezeními. Je určeno pro používání ve vnitřních prostorech. Může být používáno pouze s doprovodem.

Díky vybavení čtyřmi otočnými koly a toaletní nádobou pod sedákem, lze křeslo použít jak pro přemísťování, tak pro vykonávání fyziologických potřeb. Jeho účelem je usnadnit vykonávání fyziologických potřeb uživatele. Je zvláště doporučováno pro osoby s pohybovými problémy způsobenými:

- ochrnutím
- nadváhou nebo chorobně nízkou váhou
- degenerací nebo deformací končetin
- degenerací nebo poškozením kloubů
- poškozením nebo amputací končetin
- nemocemi srdce a cév, oběhovými potížemi

3. Montáž

1. krok Vytáhněte aretační klipy, které jsou na rámu opěradla.

2. krok Zasuňte trubky opěradla do obou zadních částí hlavního rámu a následně opěradlo zajistěte aretačními klipy.

3. krok Namontujte loketní opěrku v přední části na rámu, a to zasunutím aretačních čepů.

4. krok Namontujte pravou a levou stupačku na hlavním rámu, a to tak, že je osadíte na dvou trnech a otočíte směrem dovnitř, dokud se nezablokují.

5. krok Namontujte a nastavte bezpečnostní popruh na stupačkách.

6. krok Na lišty pod sedákem nasuňte zezadu vozíku toaletní nádobu bez víka. (Zkontrolujte, zda je nádoba nasazena správně).

Křeslo je připraveno k používání.

OBSLUHA KŘESLA

- Před každým použitím křesla zkontrolujte funkčnost brzd, zda je konstrukce v pořádku a také stav kol. Také zkontrolujte, zda jsou všechny součásti namontované správně, a zda jsou správně seřízeny.

- Křeslo není výškově stavitelné, před zahájením používání zkontrolujte, zda uživateli vyhovuje šířka křesla (45 cm).
- Křeslo je určeno pro jízdu pouze na krátké vzdálenosti ve vnitřních prostorech. Křeslo není odpružené, proto není vhodné pro dlouhodobé používání.

Pozor! Nepoužívejte pojízdné toaletní křeslo, pokud zjistíte

jakékoliv poškození nebo poruchy.

SKLÁPĚNÍ LOKETNÍCH OPĚREK

- Stiskněte aretační kolík, následně vytáhněte přední část područky ze zarážky a posuňte ji směrem dolů.
- Při zpětném umístění loketních opěrek je posouvejte směrem nahoru, až do zajištění aretačního kolíku.
- **Nepoužívejte** loketní opěrky jako podporu pro vstávání. Pokud je to nutné, požádejte o pomoc další osobu.

BRZDY

- Kola zablokujete sešlápnutím páky levé a pravé brzdy nohou. Pro uvolnění kol zatáhněte páku nohou nahoru.

STUPAČKY

- Při nasedání na křeslo a sesedání z křesla musí být stupačky ve svislé poloze. **Při nasedání a sesedání se neopírejte o stupačky, existuje riziko, že dojde k převrácení křesla a k pádu.**

NASEDÁNÍ NA KŘESLO

- Při nasedání, sesedání, změně polohy uživatele a stání je bezpodmínečně nutné zajistit brzdy.

- Křeslo musí být umístěno co nejbliž místa přisedání tak, aby se zadním kolem a předním dílem rámu dotýkalo lůžka nebo jiného používaného sedadla. Pokud uživatel není schopen samostatně nasednout, je nutné jej na křeslo přenést.
- Na křesle je nutné sedět co nejhlouběji, uprostřed sedáku, předejdete tím možné nestabilitě výrobku.

4. Technická specifikace

Celková šířka	55 cm
Vnitřní šířka	45 cm
Celková hloubka	87 cm
Výška sedáku nad podkladem	53 cm
Celková výška	95 cm
Rozměry sedáku	44 x 44 cm
Hmotnost	10,6 kg
Maximální nosnost	100 kg
Rozměry po složení	55 cm
Barva rámu	Červená

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání křesla, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s účelem.

6. Údržba

Provádějte systematickou údržbu všech součástí vozíku:

- Čalounění a polštář myjte studenou nebo teplou vodou vlhkým

(ne však mokrým) hadříkem bez použití čisticích prostředků.

Odolnější skvrny umyjte houbičkou. Při údržbě čalounění věnujte pozornost skutečnosti, abyste jej příliš nesmáčeli. Vozík sušte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

- Plastové prvky čistěte vlhkým hadříkem, případně s použitím čisticích přípravků na plasty. Dodržujte pokyny výrobce a zásady bezpečnosti při používání čisticích prostředků.
- Vždy po použití vyprázdněte a dezinfikujte nádobu a desku sedáku. Používejte přípravky na mytí toalety podle pokynů jejich výrobce.

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Kompletní nabídku najdete u našich distributorů. Více informací je na:

www.timago.com

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021